


SuperPeeler

MiniMassager

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплектация

- Минимассажёр SuperPeeler
- Двухсторонняя насадка
- Батарейки (3x 1,5В ААА)
- Инструкция по эксплуатации

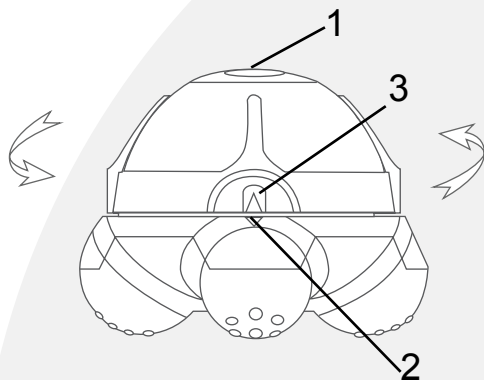

Управление

[1] Вкл./Выкл.

- Чтобы включить массажёр нажмите кнопку
- Для выключения массажёра нажмите кнопку ещё раз

Оборудование и функции

Массажёр SuperPeeler предназначен для пилинга и чистки кожи, а также для мягкого вибрационного массажа. Его использование является эффективной профилактикой целлюлита.

Благодаря влагонепроницаемому корпусу и удобной ручке массажёр можно использовать в душе, что существенно увеличивает эффективность пилинга. С помощью двухсторонней насадки из люфы и мягкой ткани вы можете либо проводить более эффективный пилинг, либо более мягкое очищение.

Массаж стимулирует кровообращение, снимает напряжение и улучшает кровоток, восстанавливает физическое состояние и активизирует все системы организма.

Благодаря своему размеру и эргономичной форме вы можете взять SuperPeeler с собой куда бы вы ни направились.

Начало эксплуатации

Перед первым использованием необходимо:

- открутить верхнюю часть массажёра против часовой стрелки
- вставить 3 щелочных батарейки, соблюдая полярность (+/-)
- соединить верхнюю часть корпуса с нижней и закрутить по часовой стрелке до упора. При этом метки [2] на верхней и нижней части должны совпадать.

Кроме обычного массажа, вы можете также провести пилинг кожи. Для этого воспользуйтесь специальной насадкой.

Выберите сторону насадки:

- люфа предназначена для эффективного очищения
- тканевая основа для мягкого очищения

Установите насадку на массажёр, закрепив петлю насадки за крючки на массажёре [3].

Включите массажёр, нажав на кнопку [1].

По окончании массажа нажмите кнопку, чтобы отключить массажёр.

Уход, обслуживание и хранение

- для чистки массажёра используйте мягкую влажную ткань;
- используйте мягкую щётку для очистки грязных труднодоступных мест в соединительных частях массажёра;
- насадку можно промыть в тёплой воде, предварительно сняв с массажёра;
- если вы планируете длительное хранение массажёра, удалите из него батареи как было описано выше;
- храните батареи в прохладном месте вдали от металлических предметов;
- храните массажёр в безопасном месте недоступном для детей.

Правила безопасности

Массажёр не требует специального обслуживания.

Используйте массажёр только по прямому назначению. В случае возможных поломок, ремонт может проводиться только уполномоченными специалистами. Несоблюдение этих правил безопасности приведёт к утрате гарантии.

Не используйте массажёр, если он не работает должным образом, был повреждён, упал в воду или сильно шумит.

Конструкция массажёра позволяет использовать его в душе, но не погружайте его в воду или другие жидкости.

Соблюдайте полярность батарей во время установки. Не используйте старые батареи. При утилизации батарей не выбрасывайте их в бытовые отходы (сдавайте их в специальные центры утилизации). Не разбирайте батареи. Не помещайте батареи в огонь.

Избегайте контакта с острыми предметами, чтобы не повредить насадку, а также не вставляйте посторонние предметы в отверстия массажёра.

Противопоказания

Массажёр SuperPeeler не предназначен для использования людьми с ограниченными возможностями (физическими, сенсорными и умственными), а также детьми без присмотра родителей.

Не массируйте участки около глаз и другие части тела с высокой чувствительностью кожи.

Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не превышайте рекомендованное время массажа в 15 минут.

Любой массаж, даже мануальный противопоказан женщинам в случае беременности и во время менструального цикла. Также противопоказано использовать массажёр если области массажа подвержены любому из следующих заболеваний:

недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, рак, кожные высыпания любого происхождения, нарушение кровообращения.

Для использования массажёра в лечебных целях, а также людям проходящим лечение рекомендуется проконсультироваться у врача.

Технические характеристики

Размеры: 9x9x7 см

Масса: 240г

Батарейки: 3x1,5В ААА

Сертификаты:



Генеральный импортёр в России:

ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008532
109518, Москва, ул. Грайвороновская, д. 4,
стр. 1

Представительство в МЕГА Белая Дача:
Люберецкий р-он, г. Котельники,
1-й Покровский пр-д, 5.

тел.: 8-495-790-05-76

info@ergonova.ru

www.ergonova.ru

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат «Ergonova GmbH» и не могут использоваться иначе, только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.
Ergonova GmbH