




MaxiGo 4

Массажер для ног

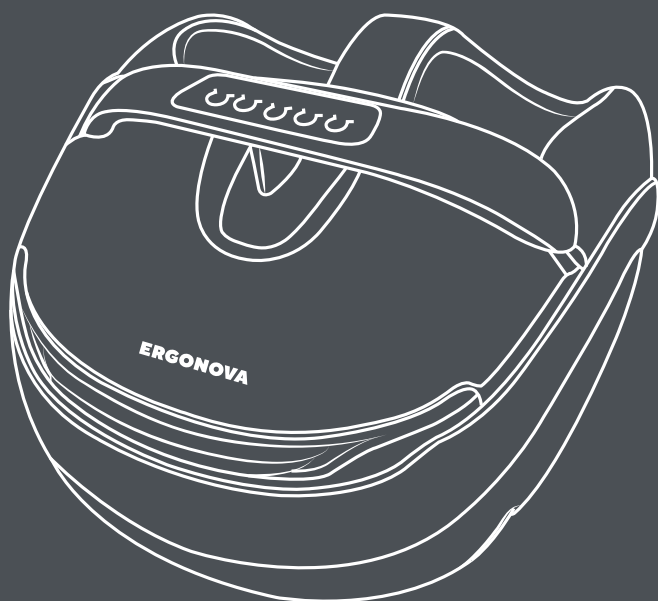

Руководство пользователя

Поздравляем с приобретением массажера для ног Ergonova MaxiGo 4! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova – немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.


Содержание

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ	3
УПРАВЛЕНИЕ	4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6


Правила техники безопасности

- Пожалуйста, избегайте прямого контакта вашей кожи с продуктом.
- Изделие оснащено нагревательным устройством, поэтому имейте это в виду, если вы нечувствительны к теплу.
- Пожалуйста, не используйте изделие в среде с высоким содержанием бензина, разбавителя, спирта или других агрессивных моющих средств, таких как отбеливатель, чтобы избежать обесцвечивания, деформации, трещин или неисправностей.
- Пожалуйста, не садитесь на изделие и не ставьте на него тяжелые предметы.
- Пожалуйста, не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей.
- Люди, перечисленные ниже, не должны использовать продукт:
 - беременные женщины;
 - люди, страдающие сердечными заболеваниями или другими проблемами со здоровьем.
- Рекомендуется не использовать продукт более 15 минут за раз. Чрезмерно длительное использование за один раз может вызвать мышечную или нервную боль.
- Детям не разрешается использовать изделие без присмотра взрослых.
- Перед или во время использования продукта, пожалуйста, не наносите медицинский / косметический крем или эмульсию на продукт или ваши ноги.
- Пожалуйста, не используйте изделие, если есть повреждения на съемных чехлах или кабеле питания.
- Пожалуйста, не используйте изделие, если вода случайно попала внутрь него.
- Пожалуйста, прекратите использование продукта, если возникает боль.

Наименование компонентов

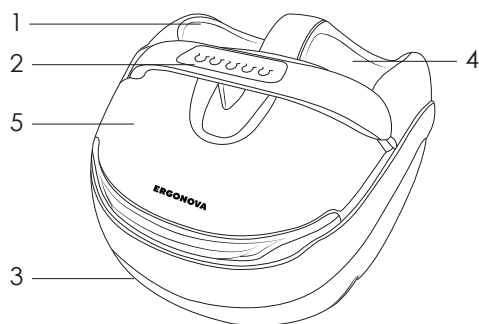

1. Застежка-молния
2. Панель управления
3. Нижняя часть корпуса
4. Съемные чехлы
Отсоединение: расстегните молнию, чтобы отсоединить ножные чехлы
Установка: прикрепите застёжки на крючок и петлю, а затем застегните молнию
5. Верхняя часть корпуса

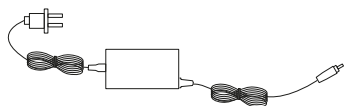

Управление



Питание

Когда устройство находится в режиме ожидания, мигает красный индикатор. Нажмите кнопку, чтобы включить устройство с активированными функциями, такими как автоматическая программа массажа, функция нагрева и постукивающий массаж (зеленый свет); Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить все функции.

Авто

На выбор представлены 3 автопрограммы:

1. Расслабление
2. Восстановление
3. Интенсивный массаж

Все программы отличаются по частоте движения роликов, компрессии и подогреву. Когда устройство работает, нажмите эту кнопку, чтобы переключиться между 3 автоматическими программами массажа (с чередованием зеленого, синего и красного света для каждой программы).

Режим

При быстром нажатии в режиме автопрограмм - выключает режим вибрации. Длительное нажатие кнопки «Режим» для активации только постукивающего массажа: нажмите кнопку «Интенсивность», чтобы настроить скорость постукивающего массажа на 3 уровнях; нажмите кнопку «Режим», чтобы выбрать один из 3 режимов постукивающего массажа. Если постукивающий массаж активируется не сам по себе, нажмите кнопку «Интенсивность», чтобы отрегулировать его между 3 уровнями интенсивности.

Интенсивность

Нажмите кнопку, чтобы настроить один из 3 уровней интенсивности (низкий: зеленый свет / средний: синий свет / высокий: красный свет). Когда устройство включено, по умолчанию будет активирован низкий уровень интенсивности.

Техническое обслуживание

- Пожалуйста, отключите устройство от источника питания перед чисткой.
- Пожалуйста, чистите только мягкой и слегка влажной губкой.
- Пожалуйста, не чистите с помощью каких-либо агрессивных моющих средств (например, бензола и растворителя).

Устранение неисправностей

Проблема	Решение проблемы
Устройство перестает работать после подключения к источнику питания.	Пожалуйста, проверьте, находится ли кабель питания в хорошем состоянии без каких-либо повреждений.
	Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключен штекер.
	После длительной работы температура устройства и двигателя может повыситься, и устройство автоматически перейдет в режим защиты. Пожалуйста, отключите устройство от источника питания и не используйте в течение 30-50 минут, чтобы дать ему остыть.
Продукт перестает работать во время использования.	Если таймер был активирован и время истекло, пожалуйста, перезапустите устройство.
	Отключите устройство от источника питания, снова подключите его к источнику питания, а затем перезапустите.

Если вам нужна помощь по вопросам, связанным с продуктом, послепродажным обслуживанием или другими соответствующими проблемами, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Технические характеристики

Наименование	Массажер для ног
Модель	MaxiGo 4
Напряжение	100В-240В 50Гц/60Гц
Потребляемая мощность	65 Вт
Таймер	15 мин

Месяц и год изготовления указаны на упаковочной коробке.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Дата производства: смотрите на упаковке.
Сделано в Китае

тел. 8-800-700-14-29
www.ergonova.ru
info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/stores/>
Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012 г.
Ergonova GmbH
Все права защищены



Импортер
ИП Мотовилов Денис Николаевич
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 116-5



Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

 **CERTIFIED**
ERGONOVA GERMANY